


NOTA INFORMATIVA 15/2021

NUEVO EQUIPO DE DETECCIÓN DE DROGAS EN LA CONDUCCIÓN

Desde la presente publicación se establece:

Se han adquirido nuevos kits de detección de drogas en la conducción, se trata de un sistema más rápido y novedoso, actualmente el cuerpo de MMEE está trabajando con este mismo sistema, dado su alto nivel de efectividad y rapidez.

El nuevo kit es de la empresa **Securetec**, modelo **DrugWipe 5S**, este modelo está preparado para la detección de cinco (5) sustancias, Cannabis, Anfetaminas, Metanfetaminas, Cocaína y Opiáceos.

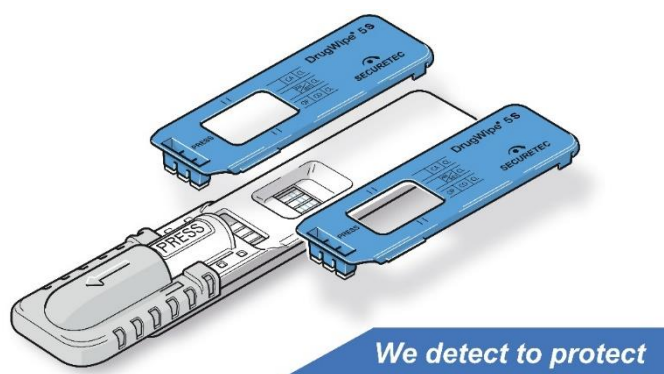


Recordatorio de protocolo de uso

Todos los kits están configurados con toda la documentación necesaria (denuncia, actas, estadística) así como la segunda prueba (Quantisal) que se envía al laboratorio SynLab. En la parte superior de la bolsa encontraremos la referencia del kit, "Kit-04", esa es la referencia que tendremos que indicar al Cap de la OAC cuando informemos, mediante correo electrónico, del uso de estos kits.

Cabe recordar que la prueba de drogas se realizará cuando el sujeto a estudio arroje resultado negativo. En caso de siniestro vial grave (heridos graves o muertos) será obligatorio realizar sendas pruebas alcohol y drogas.


Descripción del modelo de drogotest

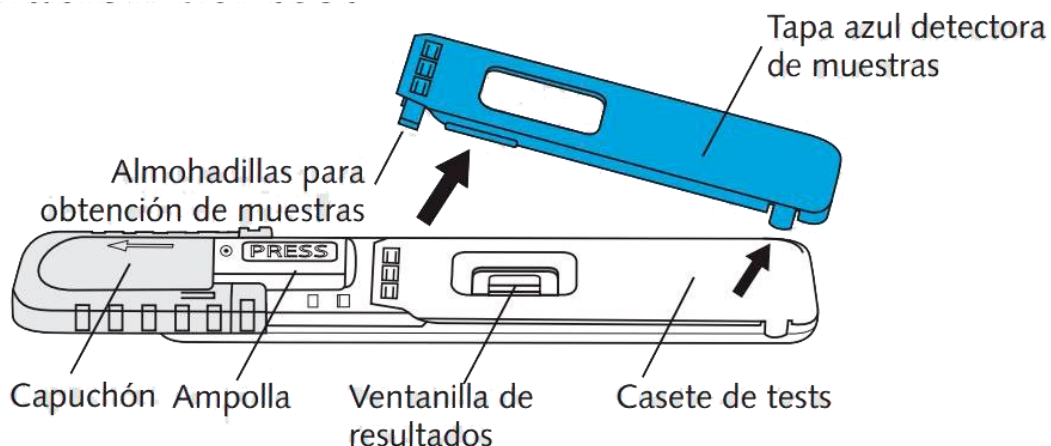

Paso a paso

Paso 1;

Retire el capuchón en la dirección de la flecha hasta que se libere la tapa azul detectora de muestras.

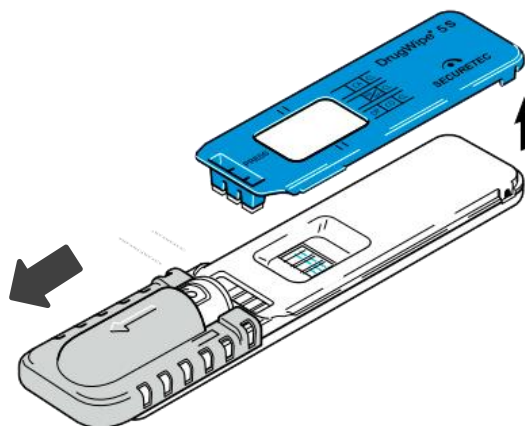

Paso 2;

Retire la tapa azul detectora de muestras del casete del test blanco. **No toque las almohadillas para obtención de muestras.**




Paso 3;

Pida a la persona que se va a someter al test que haga tres círculos con la lengua por el interior de la boca. A continuación, utilice la tapa azul detectora de muestras para recoger saliva de la lengua o del interior de los carrillos. **Si el color de las almohadillas para obtención de muestras cambia de rojo a amarillo, significa que la muestra se ha recogido correctamente.**




Paso 4;

Coloque la tapa azul detectora de muestras de nuevo en el casete de tests. La tapa azul detectora de muestras debe encajar en la ranura correspondiente tras un doble clic audible.

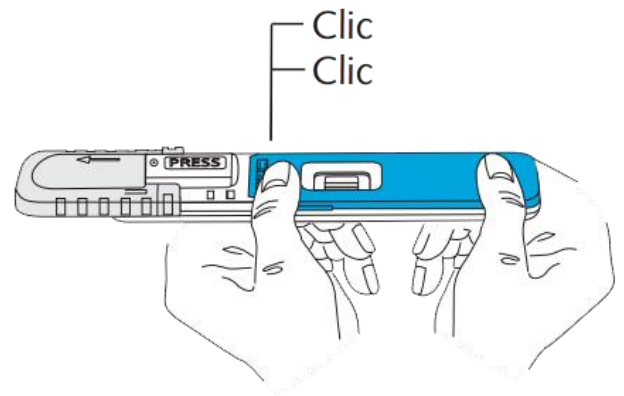


Paso 5;

Mantenga el casete de tests en posición vertical con la ampolla en la parte inferior. Coloque el pulgar horizontalmente sobre el centro de la palabra PRESS y presione con firmeza una vez hasta que se rompa la ampolla, no vuelva a presionar. Sujete el casete de tests durante 10 segundos más tal como se indica en la imagen.

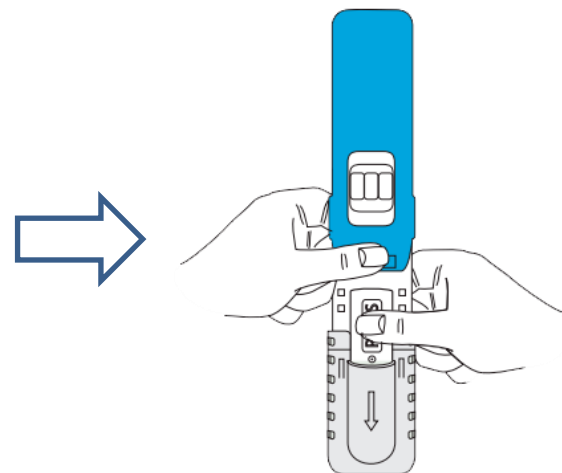

Paso 6;

Deposite el test en una superficie horizontal y manténgalo en reposo. **Transcurridos 5 minutos, lea el resultado del test, después de más de 8 min los resultados pueden estar desvirtuados.**

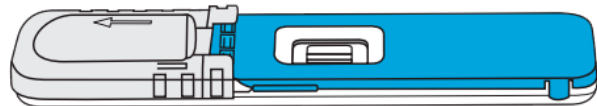

Interpretación del test

Una de las características de este test es que se trata de un test de presencia, es decir, sabemos si es positivo siempre que aparezca una línea roja en la tira reactiva, lo habitual son los test de ausencia.

1



Resultado negativo = no se han consumido drogas. Todas las líneas de control deben mostrarse en rojo para que el test sea válido.

El test se considera negativo para las drogas cuando ninguna de las líneas de resultados cambia a color rojo.

2



Resultado positivo = se han consumido drogas. Todas las líneas de control deben mostrarse en rojo para que el test sea válido. El test es positivo para las drogas en las que la línea de resultados se muestra en rojo. (Cannabis /THC)

Errores más habituales



La recogida de saliva la debe hacer el agente, nunca se entregará el test al sujeto a estudio para que sea él quien haga la recogida de la muestra.

El exceso de saliva puede invalidar la prueba, por eso esta prueba no se puede mantener en la boca.




NUNCA se debe manipular las “almohadillas” recolectoras.

Características del test

Almacenamiento

De +2 a +30°C Almacene DrugWipe únicamente dentro de este rango de temperatura.


El test se dañará si se almacena en condiciones incorrectas, como estados de altas temperaturas o congelación.

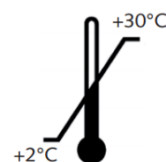

Utilización

De +5 a +40°C Utilice DrugWipe dentro de este rango de temperatura.

Si utiliza el test con lluvia o nieve, asegúrese de proteger DrugWipe 5 S de la humedad.

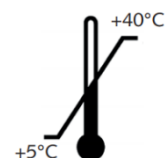

Segunda muestra (laboratorio)

En caso de que el conductor arroje resultado positivo en el test indicario, o resultado negativo pero presente signos que encontrarse influencia por las drogas, se deberá recolectar saliva en cantidad suficiente para remitirla al laboratorio analítico.


Esta recolección se realizara mediante el "Quantisal", se trata de un hisopo que quedará introducido en una probeta plástica con un líquido inerte conservante.



Hisopo

Probeta

Como se recolectará:

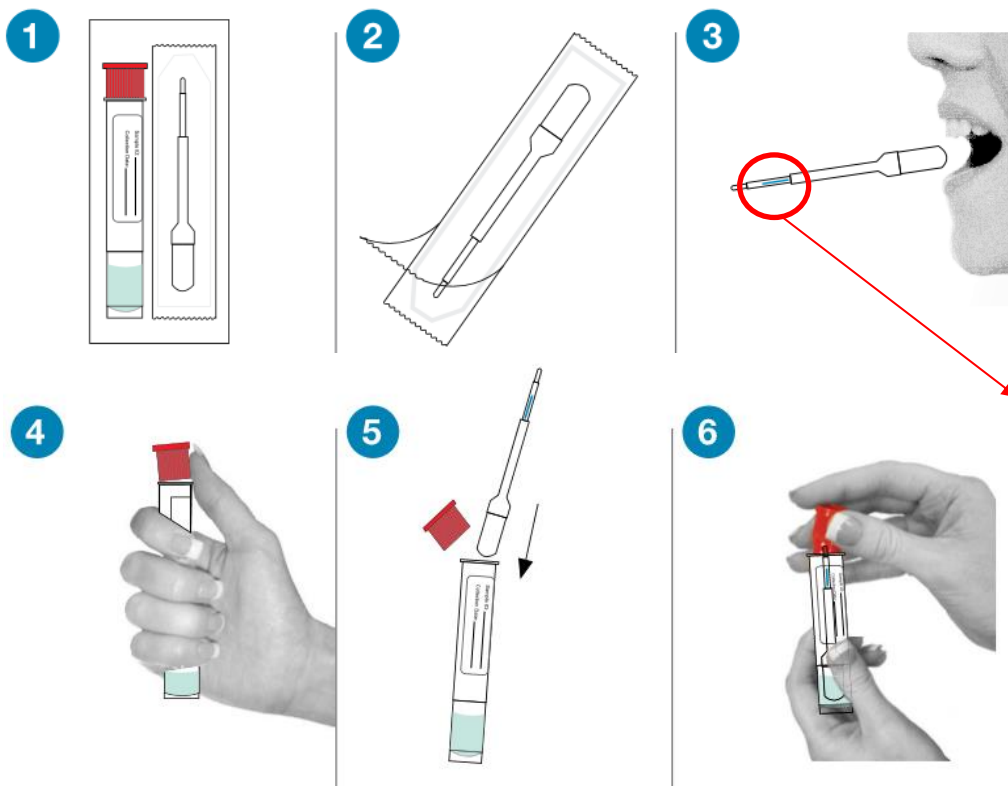

Azul es que
ya hay
saliva en
cantidad
suficiente

Cabe recordar que el sujeto no debe morder la almohadilla del hisopo, así mismo el palo del hisopo no debe ser manipulado con exceso, y al ser posible con las manos limpias.

Actas y Documentación

Aquí haremos un recordatorio de, lo que todos ya sabéis, que documentación se debe confeccionar para hacer un control de drogas.

[illegible][illegible]

Acta de derechos al conductor

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
POLICIA LOCAL
Oficina d'atenció al ciutadà

Data _____ Hora _____

Lloc dels fets _____

Acta de lliurament de bossa precintada amb mostres de saliva per al seu estudi toxicològic

L'agent, e l'hora i data indicades, realitza el lliurament per al seu trasllat al laboratori autoritzat pel Servei Català de Trànsit, del conjunt de mostres de saliva amb els codis de referència que es fa constar a continuació, per tal que es realitzi l'estudi toxicològic a fi de determinar l'absència o presència de drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques o similars.

La persona receptora ha comprovat el conjunt de mostres contingudes a la bossa, i l'agent procedeix al precinte.

Número de precinte de la bossa que conté les mostres:

Codis de barres de les mostres enviades

Agent que realitza el lliurament de la bossa precintada

Tip _____

ART _____

Signatura de l'agent _____

Conformitat de la persona a qui se li fa el lliurament de la bossa precintada per al seu trasllat al laboratori autoritzat pel Servei Català de Trànsit

Data de lliurament _____

Hora de lliurament _____

Cognoms i nom _____

Lloc, país i número del document d'identitat _____

Empresa a qui representa _____

Signatura _____

Observacions _____

A 66
Versió 1/1/13

Acta de la muestra y cadena de custodia

[illegible]

Acta de remisión de la muestra al laboratorio

Boletín estadístico




DATA:	
HORA:	
Núm. Expedient. Diagnóstico/Núm. Expedient. Análisis:	
Cos policia: POLICIA LOCAL / GUARDIA CIVIL ☐ Localitat: _____ TIP: _____ Laboratori al que es remet la mostra: ☐ Laboratori Autoritzat: SYNLAB Diagnòsticos Globales S.A.U.	
Cos policia: POLICIA GENERALITAT – MOSSOS D'ESQUADRA ☐ ART: _____ TIP: _____ Laboratori al que es remet la mostra: ☐ Institut Nacional de Toxicologia ☐ Institut de Medicina Legal de Catalunya ☐ Laboratori Autoritzat: SYNLAB Diagnòsticos Globales S.A.U.	
Tipus de mostra/es: ☐ Sang ☐ Orina ☐ Saliva ☐ Altres: _____	
Procediment:	

[illegible]

Siempre debe haber esta relación entre los elementos, sino no se podrá remitir la muestra al laboratorio analítico.

En el ámbito administrativo se sanciona la mera presencia de drogas en el organismo, es por tanto, que no requiere la necesidad de que el conductor presente signos de influencia. Cuando estemos ante esta vía (ADM) realizaremos las actas arriba reseñadas, así como el siguiente boletín de denuncia:

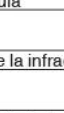 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet		NUM. EXPEDIENT 	
		Data / Fecha 	Hora
DADES DEL VEHICLE / DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula	Classe / Clase	Marca i model / Marca y modelo	Color
Lloc de la infracció / Lugar de la infracción			
Art. infringit	14.1.5A ☐ RGC ☒ LSV ☐ OM ☐ Altres / Otras: _____	Import	Punts
Art. infringido		Importe	
Fet denunciat / Hecho denunciado		1000 €	6
Circular con un vehículo reseñado teniendo presencia de drogas en el organismo (positivo en THC, Cocaína, ...)			
PERSONA DENUNCIADA			
Nom i cognoms / Nombre y apellidos		Núm. permis / permiso DNI NIF	
Domicili / Domicilio			
Població / Población		Província / Provincia	
Motiu pel qual no es notifica la denúncia a l'acte / Motivo por el cual no se notifica la denuncia en el acto			
☐ Conductor absent del vehicle / Conductor ausente del vehículo ☐ Refusat pel conductor / Refusado por el conductor ☐ Altres motius / Otros motivos (indicar quins / indicar cuales)			
Observacions / Observaciones			
		Esta infracción no es firme hasta el resultado del laboratorio analítico.	
Signatura del denunciador / Firma del denunciado/a		Signatura del denunciant / Firma del denunciante	
La signatura no implica conformitat / La firma no implica conformidad		Núm. identificació professional / Núm. identificación profesional	


Esta infracción no es firme hasta el resultado del laboratorio analítico.

Entrega y Remisión de la muestra

Una vez tengamos todas las actas confeccionadas, así como el resto de elementos de la prueba de drogas (kit, quantisal, etc) se deberá entregar, sin demora, al personal adscrito a la unidad de atestados, de la siguiente manera:



Introducimos la probeta de quantisal en la bolsa de precinto, sin cerrar esta, no hace falta que escribamos nada.

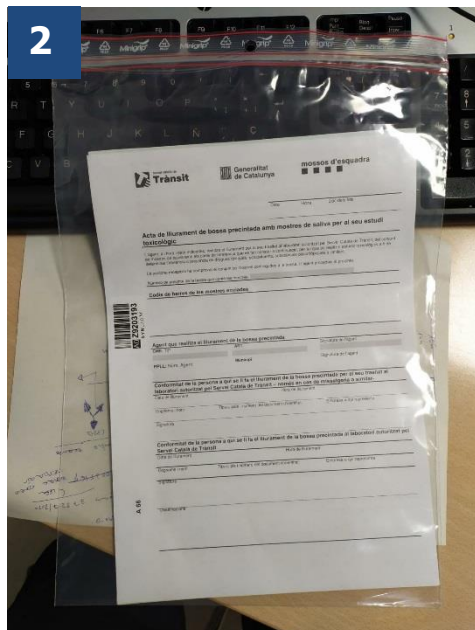

Una vez lo tengamos todo, lo introduciremos en la bolsa (todo, es decir, actas, denuncia, etc) con cierre zip, donde estaba todo el material previo de actas, kits, etc. Esta bolsa se la entregaremos a la OAC, que anotará en la cadena de custodia el cambio de custodia.

El personal de la OAC introducirá la bolsa del paso "2" en la nevera, y la bolsa con el resto de elementos se la entregaran al Sargento o Caporal de la OAC que gestionaran su tramitación.



Video Explicativo



Leyendo este código con el teléfono móvil podréis ver un video, modificado levemente, original de la Policía Local de las Rozas, sobre el funcionamiento del dispositivo.

Entra en vigor

Que la presente nota informativa tiene validez inmediata desde su publicación.

Se está trabajando en un PNT sobre la temática expuesta en la presente, pero dada la necesidad imperiosa de hacer uso de los kits, se ha decidido emitir esta nota informativa en primer lugar.

En Santa Coloma de Gramenet a 02 de mayo 2021.

Cap de la OAC
Policía Local
Santa Coloma de Gramenet